




HURTIG HJÆLP TIL SELVHJÆLP

eyeaid er markedets eneste øjenskyller, der reelt kan betjenes med én hånd. Den innovative og patenterede mekaniske øjenåbner er i stand til at tvinge det skadede øje åbent, uden fysisk berøring med "urene" hænder. Skadelige væsker og stoffer fra urene hænder og fingre overføres derfor ikke til skadelidtes øjne, og risikoen for yderligere skadespåvirkninger minimeres.

eyeaid øjenskylleren er baseret på en steril Bag-In-Valve aerosolløsning der sikrer, at øjet tilføres den rette mængde skyllevæske i et konstant og langvarigt flow. Indholdet i en 250 ml. eyeaid øjenskyllende yder minimum 15 minutters skylletid eller 4-5 gange så lang tid, som ved andre konventionelle løsninger. Trykket i flasken gør det muligt at skylle øjet i en foroverbøjet position, som sikrer at den brugte skyllevæske ledes sikkert bort fra øjet.

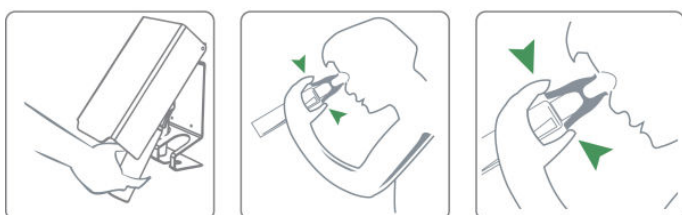

Indhold i hver 250 ml. sprayflaske

| Ingrediens | CAS nr. | Vægt i % |
|-------------------------|------------|---------------------|
| Sodium Dihydrogenfosfat | 13472-35-0 | <1 |
| Sodium Klorid, USP | 7647-14-5 | 0,9 |
| Sodium Hydroxid | 1310-73-2 | Justeret til pH 7,4 |
| Vand, USP | | 100 |
| Nitrogen, USP | 7727-37-9 | |

Teknisk specifikation – sprayflaske:

- 250 ml. 0,9% bufferet natriumklorid opløsning
- Drivgas - Nitrogen
- Tryk – 4 Bar
- Plastmateriale: Borealis BC245MO (PP)
- Netto vægt 315 gr.

Teknisk specifikation – eyeaid station:

- Holder – 2 mm stål med pulver lakering
- Låg – 2mm akryl (axpet) med silkeprint
- Dimensioner – 320 X 175 X 103 mm



eyeaid er klassificeret som et sterilt medicin teknisk produkt efter MDD 93/42 EEC klasse 2A og godkendt i henhold til EU 0413. Patentanmeldt under PCT/DK2011/050013

| Artikel nr. | Beskrivelse | EAN nr. |
|-------------|---|---------------|
| 300777 | eyeaid® øjenskyllende 250 ml. sprayflaske | 7332343001196 |
| 300779 | eyeaid® øjenskyllende refill box inkl. 2 X 250 ml. sprayflasker | 7332343001189 |
| 300780 | eyeaid® station inkl. 2 X 250 ml. sprayflasker | 7332343001202 |
| 300781 | eyeaid® station | 7332343001219 |

For yderligere information se www.eyeaid.dk